

Il software per la gestione del laboratorio di farmacia

Manuale d'uso 2023

Gestione della etichetta ambientale


1) Contenitori: definire la tipologia di materiale del contenitore.

Per i contenitori multimateriale indicare il materiale maggiormante presente

Aprire la gestione contenitori dal menu "altri archivi" e selezionare il contenitore desiderato, nell'esempio il contagocce in vetro.

Fare click sul nome del contenitore, non sui sotto componenti.

Azione da compiere una sola volta

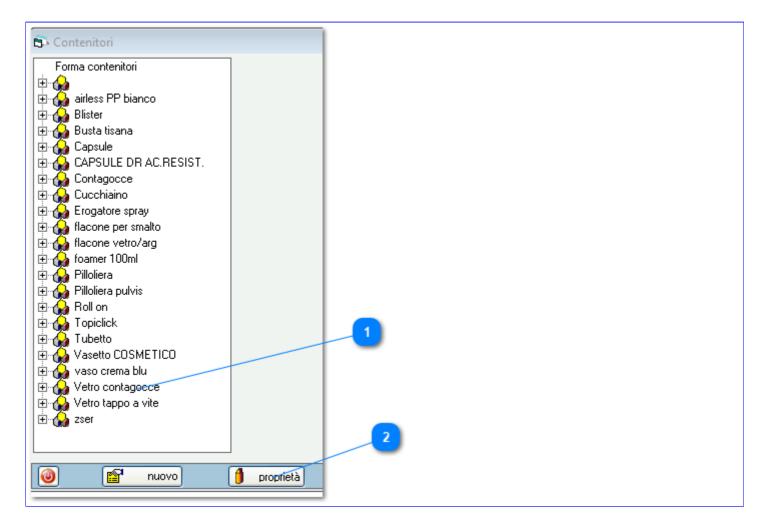


- Selezione del contenitore.
 Fare click sul nodo princiale.
- Tramite il pulsante Proprietà si accede alla modifica

2) Contenitori: selezionare il materiale dal menu a tendina.

Le tipologie indicate rispettano la Decisione Commissione Ce n. 97/129/Ce


Azione da compiere una sola volta

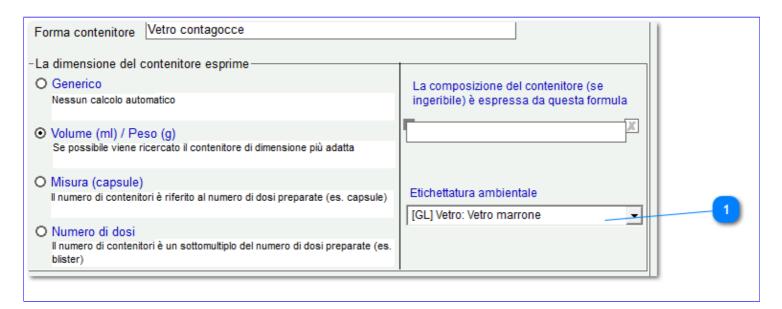

1 Elenco tipologie di materiali e relativo codice

3) Etichette: nella etichetta che si vuole utilizzare inserire l'icona del riciclo e posizionarla adeguatamente. L'icona che appare è un segnaposto che verrà di volta in volta adeguata ai dati del contenitore della formulazione della quale si stampa l'etichetta.


Azione da compiere una sola volta

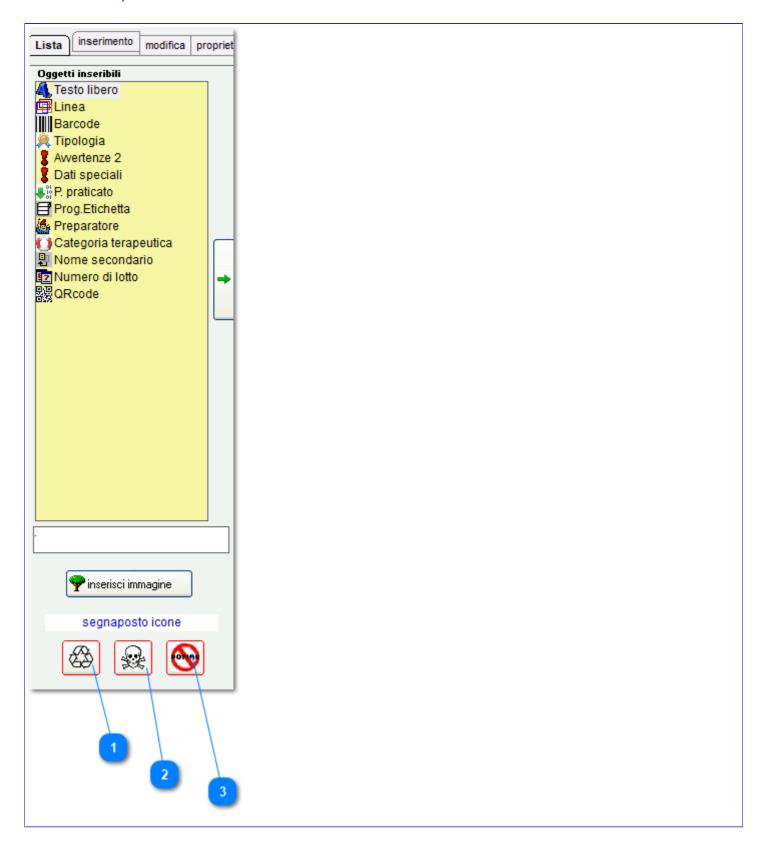

- lcona segnaposto per l'etichetta ambientale dei contenitori
- lcona segnaposto per le formulazioni contenenti veleni
- 3 Icona segnaposto per le formulazioni contenenti dopanti

4) Etichette: nella etichetta appare l'icona del ricilo ed il materiale con il relativo codice. L'icona che appare è un segnaposto che verrà di volta in volta adeguata ai dati del contenitore della formulazione della quale si stampa l'etichetta.


Azione da compiere una sola volta

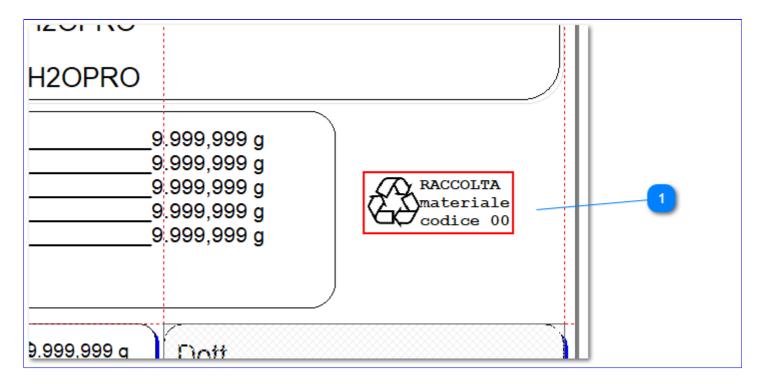

Posizionare l'icona spostandola adeguatamente
Per modificare la dimensione modificare la dimensione dei caratteri del testo.


5) Formulazione: nella formulazione definire i contenitori primario e secondari

Azione da compiere una sola volta

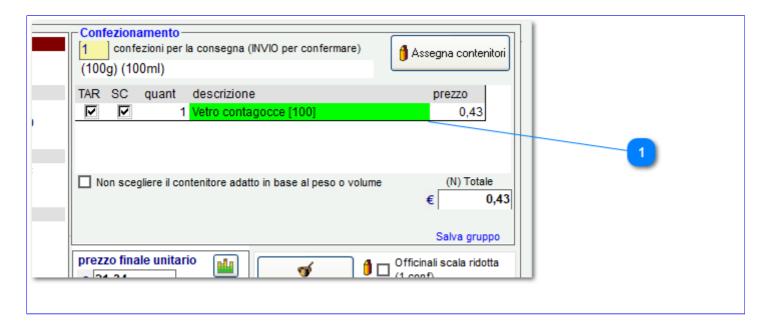

1 Contenitori della formulazione

6) Formulazione: al momento della stampa della etichetta il metariale ed il codice del contenitore saranno riportati nella dimensione e posizione di cui al punto 4

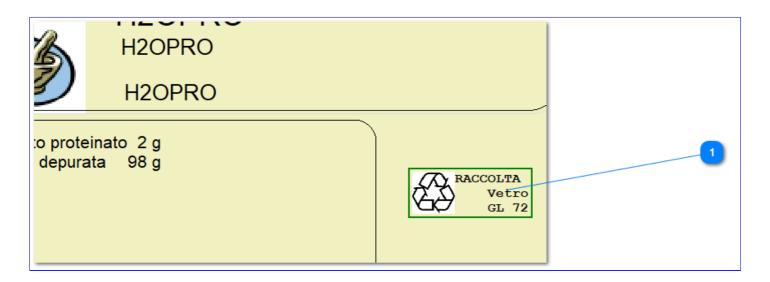



1 Codice per smaltimento ambientale valorizzato

Il colore del bordo viene assegnato seguendo questo codice di colorazione



7) Preferenze: l'etichetta ambientale deve essere riportata nelle preparazioni prive di attività terapeutica. Da Strumenti>preferenze>Parametri è possibile abilitare la funzione a tutte le tipologie.

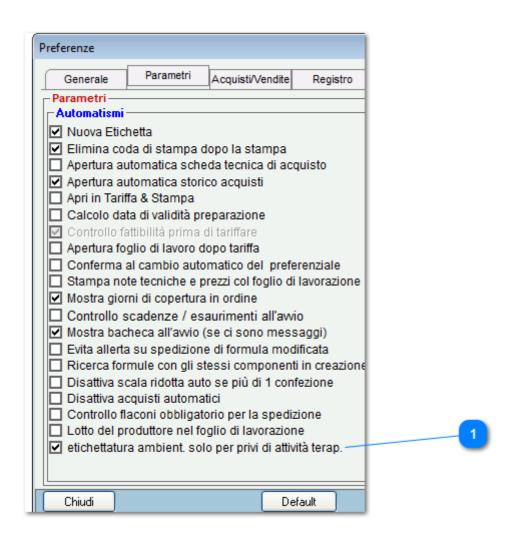

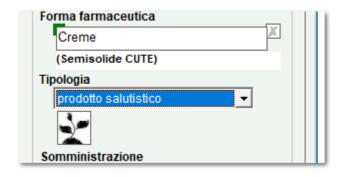

1 Abilita o disabilita l'etichetta ambientale per tutte le tipologie